

ANTES DE EMPEZAR · CONTENIDO DEL EQUIPO

Compresor Taurus IV

8 L/min, ajuste manual de presión 30–60 mmHg, ciclo alternante A/B de 10 a 12 min. 120 V / 60 Hz.

Colchón de 17 celdas

Celdas tubulares de 12,5 cm en Nylon/PVC. Las **tres de la cabeza no alternan**: hacen de almohada.

Base de espuma incorporada

7,6 cm de espuma de polietileno en un bolsillo interno. Por eso **reemplaza el colchón** de la cama.

Mangueras y conector rápido

Juego doble con acople de un solo movimiento. Debe oírse el **clic** al conectar.

Revise el equipo al desembalar. Si observa daños de transporte, no lo instale: comuníquese con Grand Healthcare antes de conectarlo.

INSTALACIÓN EN 6 PASOS

- 1 Retire el colchón de la cama.** El Tauro trae su propia base de espuma: va **directo sobre la base de la cama**, nunca encima de otro colchón. Si lo superpone, el paciente queda demasiado alto y las barandas dejan de proteger.
- 2 Extienda el colchón** con la cara impresa hacia arriba y las mangueras hacia el **piecero**. La etiqueta roja de CPR queda en el cabecero.
- 3 Pase las solapas por debajo de la base** y apriételas. En cama perfilada, las laterales rodean las secciones móviles.
- 4 Cuelgue el compresor** del piecero con sus ganchos, vertical y firme. Si la cama no lo permite, sobre superficie plana y estable, nunca en el piso.
- 5 Conecte el conector rápido** hasta oír el clic. Verifique que las mangueras no queden dobladas ni atrapadas bajo el colchón.
- 6 Conecte a un tomacorriente de 120 V con polo a tierra** y encienda con el interruptor del costado. El inflado toma **unos 30 minutos**.

⚠ Los tres errores que ocasionan casi todas las llamadas a servicio técnico. Nunca amarre las solapas a los rieles o barandas laterales — al bajar la baranda se rompen y el colchón se pierde. **No lo instale sobre el colchón de la cama**: es un sistema de reemplazo, no una colchoneta de superposición. **No lo reporte como dañado durante la primera media hora**: mientras infla, el LED amarillo de baja presión encendido es normal.

Los tiempos del equipo, en orden. Al encender, el compresor empieza a llenar las celdas y el LED amarillo se enciende: es normal. La presión de trabajo se alcanza en **unos 30 minutos** y el LED verde reemplaza al amarillo. La **alarma sonora no suena durante los primeros 40 minutos** justamente para no sonar mientras infla; pasado ese tiempo, sí suena si la presión sigue baja. En modo estático, las celdas terminan de igualarse en **unos 6 minutos**: espere ese momento antes de trasladar al paciente.




Instalación correcta: colchón directo sobre la base, solapas por debajo, compresor colgado del piecero y etiqueta roja de CPR en el cabecero



Compresor Taurus IV. Interruptor principal en el costado; conector rápido y mangueras al frente

PANEL DE CONTROL

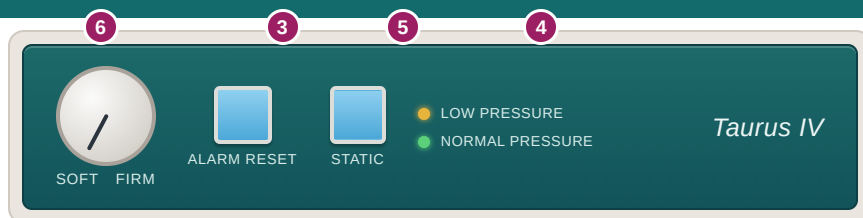

- **(1) Cable de poder.** 120 V con polo a tierra.
- **(2) Interruptor principal.** En el costado del compresor, no en el panel.
- **(3) ALARM RESET · silenciar alarma.** Calla el sonido; el LED amarillo sigue encendido hasta que se resuelva la causa.
- **(4) Indicadores de presión. NORMAL PRESSURE** (verde): presión alcanzada. **LOW PRESSURE** (amarillo): por debajo de lo ajustado.
- **(5) STATIC · modo estático.** Deja las celdas fijas para trasladar o reposicionar al paciente. Se pulsa de nuevo para volver al alternante.
- **(6) Perilla SOFT / FIRM.** Ajuste manual de presión. Horario = más firme; antihorario = más suave.

VERIFICACIÓN DE ENTREGA

La prueba de la mano

Con el paciente acostado boca arriba y el equipo en presión normal, deslice la mano abierta entre el colchón y la base de la cama, a la altura del **sacro**. Debe quedar un espacio de **25 a 40 mm**.

Si toca fondo, gire hacia **FIRM**, espere un ciclo y repita. Vuelva a medir cada vez que cambie el peso del paciente.

Antes de entregar el equipo, confirme

- Las celdas alternan por turnos: que no todas estén infladas a la vez **es normal**.
- El LED verde **NORMAL PRESSURE** está encendido y el amarillo apagado.
- Las solapas están bajo la base, no en los rieles.
- La etiqueta roja de CPR está accesible y el personal sabe dónde queda.
- La perilla quedó en el punto de la prueba de la mano.

⚠ Emergencia · RCP. Ante una parada respiratoria, hale la **etiqueta roja de CPR** del cabecero para liberar el aire de inmediato; si no la tuviera a la vista, **desacople el conector rápido**. La superficie queda firme en segundos para las maniobras de reanimación.

SI ALGO FALLA EN EL SITIO

La alarma suena

Revise conector, mangueras dobladas y fugas en celdas. **ALARM RESET** solo calla el sonido.

Una zona no infla

Celda desacoplada del circuito o perforada. Se cambian una por una.

El paciente toca fondo

Gire a **FIRM** y espere un ciclo (10-12 min) antes de medir. El peso no debe superar **180 kg**.



Manual de usuario y manual de servicio

Escanee con la cámara o entre a grandhealthcare.co/soporte-tauro: los tres documentos en PDF, siempre en su última versión.

Datos del equipo

Institución

Serie del compresor

Fecha de instalación

Servicio / área

Serie del colchón

Instaló