


COLCHONETA DE GEL MULTIUSO

Para la cuna o para la zona pélvica en la cama: gel y espuma para prevenir lesiones por presión

La colchoneta GHC-MATT-002 es una superficie estática de **gel polimérico de grado médico en cuadrícula** sobre una base de **espuma viscoelástica**, de **90 × 57 cm y 2 cm de espesor**. Tiene dos usos: como superficie para la **cuna**, sobre su colchón, y como **protección de la zona pélvica** en la cama del adulto, atravesada bajo el sacro y las caderas, que es donde más se forman las úlceras por presión. En ambos casos redistribuye la presión de forma homogénea sobre la superficie de apoyo.

Es el mismo paño de gel con el que está construida la colchoneta de cama GHC-MATT-003, que une tres de ellos: sus 90 cm coinciden con el ancho de una cama sencilla u hospitalaria. Comparte material y principio con el colchón neonatal GHC-MATT-001 para incubadora.

El gel aporta además **estabilidad térmica**: disipa el calor acumulado en el decúbito prolongado, un factor que en la piel del lactante —fina y con alta relación superficie/peso— pesa tanto como la presión misma. Se entrega con **sábana y cubierta impermeable ajustable con elástico**, hechas a su medida.

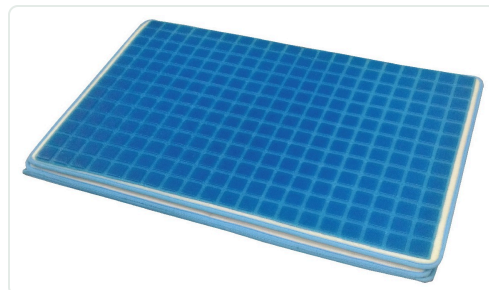

Paño de gel de 90 × 57 × 2 cm, gel sobre espuma

90 × 57

cm · cuna o zona pélvica

2 cm

espesor nominal

Sábana + cubierta


impermeable ajustable

Clase I

INVIMA 2024DM-0029886

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Referencia	GHC-MATT-002 · fábrica GEL-BED-9057
Familia registrada	Colchón — GHC-MATT-001 a 006
Dimensiones	90 cm (largo) × 57 cm (ancho)
Espesor nominal	2 cm
Formato	Paño único, sin pliegues
Capa superior	Gel polimérico de grado médico en cuadrícula de celdas
Capa base	Espuma viscoelástica de alivio de presión
Incluye	Sábana y cubierta impermeable ajustable con elástico
Usos	Sobre el colchón de la cuna, o atravesada bajo la pelvis en la cama
Materiales	Informes de ensayo SGS, REACH y RoHS, según el fabricante
Garantía	1 año por defectos de fabricación

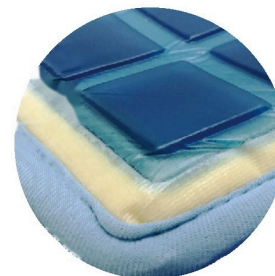

Corte: celdas de gel sobre la base de espuma viscoelástica



Detalle de las celdas de gel

Sueño seguro del bebé. La recomendación internacional vigente para el sueño de los menores de 12 meses es un colchón **firme y plano, sin ninguna superficie blanda encima**. Por eso, en bebés menores de 12 meses esta colchoneta se usa **solo en el entorno asistencial** —cuna hospitalaria, servocuna, unidad de recién nacidos o pediátrica— con el paciente posicionado y vigilado por el personal a cargo. **No la use para el sueño de un bebé en casa.**

Referencia: American Academy of Pediatrics, *Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment*, Pediatrics 150(1), 2022. La advertencia aplica al sueño no supervisado del lactante; no restringe el uso asistencial descrito en esta ficha.

INDICACIÓN, COLOCACIÓN Y CUIDADO


Para quién está indicada, cómo se instala en la cuna y cómo se limpia

2 INDICACIÓN CLÍNICA Y LÍMITES

- **Cuna:** cuna hospitalaria, servocuna y unidades neonatales y pediátricas, con el paciente **posicionado y vigilado** por el personal.
 - Prevención de lesiones por presión en estancias prolongadas: sedación, ventilación, posoperatorio o movilidad reducida.
 - Control térmico de la interfaz entre la piel y la cuna.
 - En casa, en la cuna **solo en niños mayores de 12 meses** con movilidad reducida y por indicación del profesional de salud.
 - **Zona pélvica en la cama del adulto:** riesgo bajo, en casa o en la institución, sobre el colchón y bajo la sábana.
- ✗ **No es superficie de sueño para bebés menores de 12 meses fuera del entorno asistencial vigilado.**
 - ✗ Retírela para la reanimación: las compresiones exigen superficie rígida.
 - ✗ No la use sobre un colchón hundido ni deje espacios contra las paredes de la cuna.
 - ✗ Bajo la pelvis no reemplaza una superficie de aire en riesgo alto ni con úlcera instaurada.
 - ✗ Retírela si la película del gel está cortada o hay fuga de gel.


3 COLOCACIÓN

En la cuna

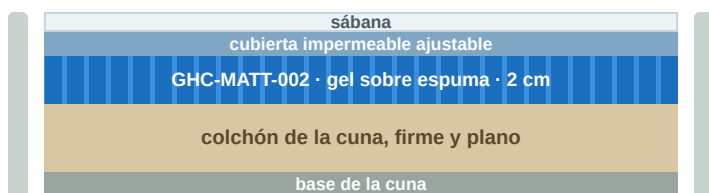

Corte de la cuna: la colchoneta va sobre el colchón, dentro de su cubierta y bajo la sábana, sin espacios contra las paredes de la cuna.

En la cama, bajo la pelvis

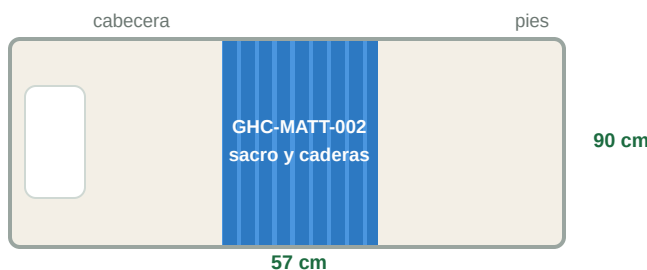

Vista superior: el paño va atravesado bajo la pelvis.

4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ELEMENTO	PROCEDIMIENTO	EVITAR
Sábana y cubierta	Retírelas y lávelas por separado siguiendo su etiqueta; cámbielas entre pacientes. La cubierta impermeable también se limpia con paño húmedo y jabón neutro.	Cloro, plancha y secado con calor alto.
Gel y espuma	Paño humedecido con jabón o detergente de pH neutro, retiro del jabón con paño limpio y secado al aire sobre superficie plana.	Yodo, solventes, abrasivos y esponjas metálicas. No sumergir ni lavar a máquina.
Almacenamiento	Extendida y plana, en lugar seco, protegida del polvo y del sol.	Objetos cortopunzantes y peso encima.

5 REGISTRO Y FABRICANTE

IMPORTA Y COMERCIALIZA

Grand Healthcare Colombia S.A.S.
NIT 901.044.954-9 · Calle 75 # 23-09, Bogotá D.C.

REGISTRO SANITARIO INVIMA

2024DM-0029886 · Resolución 2024055892 del 4 de diciembre de 2024
Dispositivo no invasivo, Clase I · vigente hasta diciembre de 2034

FABRICANTE

Changzhou Well Lands Technology Co., Ltd. — China
Informes de ensayo de materiales SGS, REACH y RoHS, según el fabricante

REFERENCIA Y LOTE

GHC-MATT-002 · referencia de fábrica GEL-BED-9057
Referencia y lote impresos en la etiqueta del producto