


COLCHONETA REFRESCANTE DE GEL Y ESPUMA

Superficie de superposición para prevención en riesgo bajo y control térmico en reposo prolongado

La colchoneta refrescante Grand Healthcare se extiende **sobre el colchón existente** y no lo reemplaza. Combina una capa superior de **gel polimérico de grado médico en cuadrícula de celdas** con una base de **espuma viscoelástica**: la carga se reparte sobre toda la superficie de apoyo en lugar de concentrarse en el sacro, los talones y las caderas.

El gel aporta además **estabilidad térmica**: absorbe y disipa el calor que se acumula entre la piel y la cama en el reposo prolongado. El calor y la humedad reblandecen la piel y aumentan la fricción, así que mantener fresca y seca esa zona es parte de la prevención.

Está formada por **tres paños de gel de 90 × 57 cm unidos entre sí**: cubre el cuerpo completo y se pliega en tres para guardarla o llevarla de viaje. Se entrega con **sábana y cubierta impermeable ajustable con elástico**.

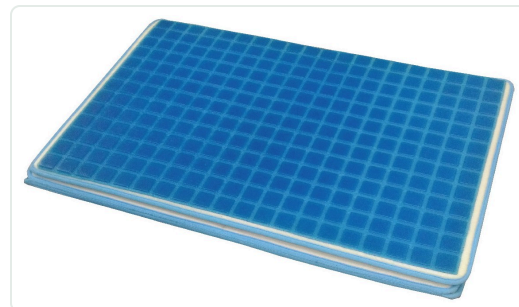

Capa de gel en cuadrícula sobre base de espuma viscoelástica, plegable en tres secciones

173,5 × 91,5

cm · cuerpo completo

2 cm

espesor nominal

3


secciones plegables

Clase I

INVIMA 2024DM-0029886

1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Referencia	GHC-MATT-003 · fábrica GEL-BED-17492H
Familia registrada	Colchón — GHC-MATT-001 a 006
Dimensiones	173,5 cm (largo) × 91,5 cm (ancho)
Espesor nominal	2 cm
Formato	Tres paños de 90 × 57 cm unidos, plegable en tres
Capa superior	Gel polimérico de grado médico en cuadrícula de celdas
Capa base	Espuma viscoelástica de alivio de presión
Incluye	Sábana y cubierta impermeable ajustable con elástico
Instalación	Superposición: sobre el colchón de la cama
Materiales	Informes de ensayo SGS, REACH y RoHS, según el fabricante
Garantía	1 año por defectos de fabricación

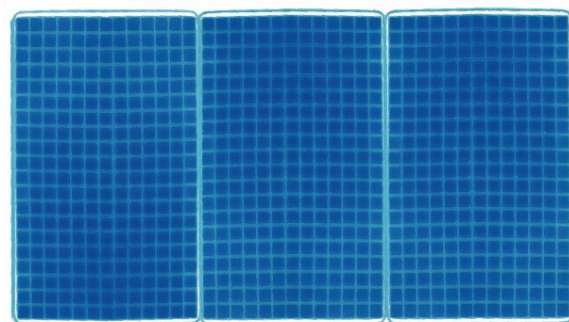


173,5 cm

91,5 cm

Vista superior desplegada



Plegada en tres para guardarla o transportarla

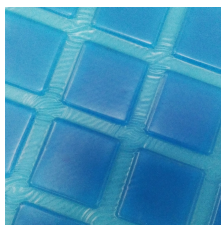

Detalle de las celdas de gel



Con la cubierta puesta


INDICACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y CUIDADO

Para quién está indicada, cómo está hecha y cómo se limpia

2 INDICACIÓN CLÍNICA Y LÍMITES

- **Riesgo bajo** de úlcera por presión, con piel íntegra y movilidad conservada.
 - **Control térmico** en reposo prolongado: usuarios que sudan, climas cálidos, habitaciones sin climatización.
 - Cobertura de cuerpo completo sobre una cama estándar, **sin cambiar el colchón**.
 - Uso domiciliario, hogares geriátricos y viajes: se pliega en tres.
- ✗ **No indicada en riesgo alto o muy alto ni con úlcera instaurada.** Dos centímetros no dan inmersión suficiente para descargar el sacro o los talones: corresponde una superficie de aire alternante.
 - ✗ No reemplaza los cambios de posición ni la revisión diaria de la piel.
 - ✗ No colocar sobre un colchón hundido o blando en exceso.

3 CONSTRUCCIÓN EN CAPAS

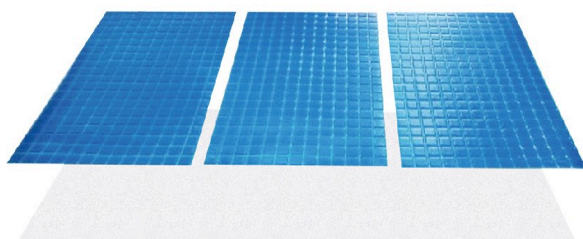

- 1 Gel en cuadrícula.** Las celdas se deforman bajo la prominencia ósea y reparten la carga hacia las zonas vecinas; el gel disipa el calor.
- 2 Espuma viscoelástica.** Se adapta al contorno del cuerpo, absorbe el resto de la carga y da soporte continuo.
- 3 Cubierta impermeable ajustable y sábana.** La cubierta, con elástico, se ajusta a la colchoneta y protege el gel y la espuma de los líquidos; la sábana va encima.

4 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

ELEMENTO	PROCEDIMIENTO	EVITAR
Sábana y cubierta	Retírelas y lávelas por separado siguiendo su etiqueta. La cubierta impermeable también se limpia con paño húmedo y jabón neutro. Devuélvalas completamente secas.	Plancha, cloro y secado con calor alto: dañan la capa impermeable.
Gel y espuma	Paño humedecido con jabón o detergente de pH neutro, enjuague con paño limpio y secado al aire sobre superficie plana.	Yodo, solventes, abrasivos y esponjas metálicas. No sumergir, no lavar a máquina, no secar al sol ni con aire caliente.
Almacenamiento	Plegada por sus líneas de doblez o extendida y plana, en lugar seco.	Objetos cortopunzantes, peso encima y dobleces fuera de sus líneas.

5 REGISTRO Y FABRICANTE

IMPORTA Y COMERCIALIZA

Grand Healthcare Colombia S.A.S.
NIT 901.044.954-9 · Calle 75 # 23-09, Bogotá D.C.

REGISTRO SANITARIO INVIMA

2024DM-0029886 · Resolución 2024055892 del 4 de diciembre de 2024
Dispositivo no invasivo, Clase I · vigente hasta diciembre de 2034

FABRICANTE

Changzhou Well Lands Technology Co., Ltd. — China
Informes de ensayo de materiales SGS, REACH y RoHS, según el fabricante

REFERENCIA Y LOTE

GHC-MATT-003 · referencia de fábrica GEL-BED-17492H
Referencia y lote impresos en la etiqueta del producto