

COJÍN COMFORT CARE

Espuma de poliuretano contorneada para la prevención de úlceras por presión y la estabilidad postural

IMPORTANTE: lea este manual antes de usar el cojín. El Comfort Care es un cojín de **riesgo bajo con apoyo postural**. Si el usuario no cambia de posición por sí mismo, tiene riesgo alto o ya tiene una lesión en la zona de apoyo, necesita una superficie de mayor protección: consúltenos antes de usar este modelo.

1 QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA

El Comfort Care no es un bloque plano de espuma: su superficie está esculpida en zonas. Un **pozo pélvico central** aloja las tuberosidades isquiáticas, dos **bordes altos** sostienen el fémur y los trocánteres, y un **canal posterior** descarga el sacro y el cóccix.

Esa forma permite que los isquiones se hundan entre **2 y 3 cm**. Al hundirse la pelvis, el peso deja de concentrarse en dos puntos óseos y pasa a repartirse sobre los muslos y la zona glútea, que toleran mucho mejor la carga. Los bordes altos mantienen la pelvis centrada y limitan el deslizamiento lateral y hacia adelante, una causa frecuente de mala postura y de cizallamiento sobre el sacro.

La espuma de poliuretano Bestabsorb™ cede bajo la carga y recupera su forma al levantarse el usuario. Las **perforaciones** del bloque dejan circular el aire y reducen la acumulación de calor. Se entrega con **funda de malla transpirable**, tela de enfriamiento en la cara superior y base antideslizante.



Bloque de espuma: canal posterior, pozo pélvico y perforaciones de ventilación

2 PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO

Uso previsto según registro sanitario: evita las zonas de presión en personas con limitación funcional, en donde las prominencias óseas se encuentran en contacto directo con superficies fijas, lo que a futuro puede provocar escaras.

- Personas con **riesgo bajo** de lesión por presión que pasan periodos prolongados sentadas y necesitan además **estabilidad postural**.
- Usuarios de silla de ruedas que se reacomodan por sí mismos.
- Molestia o dolor en el **cóccix**: el canal posterior evita el apoyo directo.
- Uso clínico, domiciliario y laboral: silla de ruedas, oficina y conducción.
- Riesgo alto o muy alto, o úlcera ya instaurada: requiere una superficie de mayor inmersión, como el Air Flo o el Qubix Optimum.
- Usuarios sin plan de cambios de posición ni quien los reposicione.
- Usuarios que superen **100 kg**.
- No usar sin la funda, ni sobre otro cojín o almohada.

3 REFERENCIAS


REFERENCIA	MEDIDAS (ANCHO × FONDO × ALTO)	PESO MÁXIMO DEL USUARIO
GHC-SEAT-004	42 × 42 × 8 cm	100 kg
GHC-SEAT-004L	46 × 42 × 8 cm	100 kg

Elija el ancho según la silla: el cojín debe cubrir el asiento sin sobresalir por los bordes ni quedar comprimido entre los apoyabrazos. Un cojín más ancho que el asiento dobla sus bordes y empeora la postura.

LA FORMA ES LA FUNCIÓN

Las cuatro zonas del bloque y cómo colocarlo

4 LAS CUATRO ZONAS DEL BLOQUE

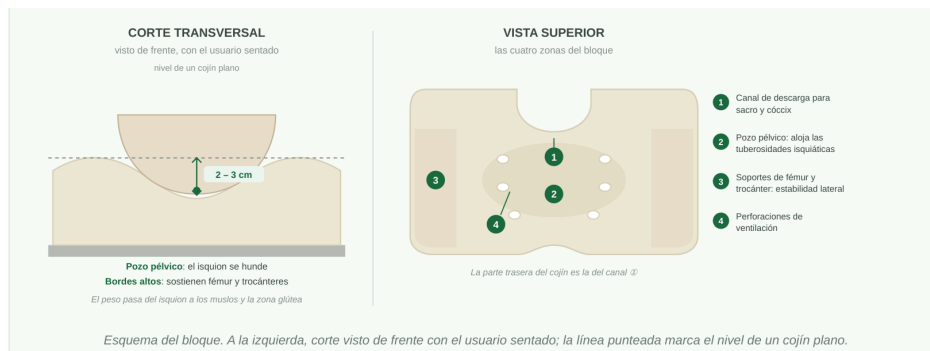

ZONA	QUÉ HACE	POR QUÉ IMPORTA
Pozo pélvico central	Permite que los isquiones se hundan entre 2 y 3 cm	Aumenta el área de contacto y baja la presión pico en el punto de mayor riesgo
Bordes de fémur y trocánter	Sostienen los muslos y bloquean el desplazamiento lateral de la pelvis	Dan estabilidad lateral y anteroposterior: menos deslizamiento, menos cizallamiento
Canal posterior	Descarga la zona del sacro y el cóccix	Evita el apoyo directo sobre el cóccix, frecuente origen de dolor y de lesión
Perforaciones	Abren paso al aire dentro del bloque de espuma	Ayudan a disipar el calor y la humedad, que reblandecen la piel

5 COLOCACIÓN EN CINCO PASOS

- Oriente el canal hacia atrás.** el canal de descarga y el pozo pélvico van en la parte trasera del asiento. Colocado al revés, el cojín empuja el cóccix en lugar de descargarlo. La base antideslizante, contra el asiento.
- Céntrelo en la silla.** el pozo pélvico alineado con la línea media del usuario y los bordes altos por fuera de los muslos.
- Siente al usuario hasta el fondo.** la pelvis contra el respaldo, con brazos y pies apoyados. Si queda adelantado, la pelvis se sale del pozo y se pierde el efecto.
- Haga la prueba de la mano.** como se explica abajo.
- Reposicione y revise la piel.** favorezca los cambios de peso y limite el tiempo sentado de corrido.



En la silla de ruedas: base antideslizante contra el asiento y canal hacia atrás

La prueba de la mano

Con el usuario sentado en su postura habitual, deslice la mano abierta por debajo del cojín, con la palma hacia arriba, bajo la prominencia ósea más baja. **Debe quedar material entre su mano y el hueso.** Si siente el isquion contra la base, el usuario tocó fondo: el cojín ya no redistribuye la presión. Este modelo no se infla ni se regula, así que no hay ajuste que lo corrija: hay que cambiar de cojín o pasar a una superficie de mayor protección. Repita la prueba cada pocos meses, no solo el primer día.

CUIDADO, VIDA ÚTIL Y GARANTÍA

Cuándo dejar de usar el cojín y con quién comunicarse

Este cojín no reemplaza los cambios de posición. Reparte la carga, pero el tejido sigue comprimido mientras el usuario está sentado. Cambie el apoyo—inclinarse adelante o a un lado, levantarse— con la frecuencia que indique el equipo de salud, y revise a diario isquiones, sacro, cóccix y trocánteres: si un enrojecimiento no desaparece 30 minutos después de retirar la presión, suspenda el uso y consulte al profesional tratante.

6 ADVERTENCIAS

- **No supere 100 kg.** Por encima del límite el cojín toca fondo aunque esté nuevo.
- **Use siempre la funda.** Su base antideslizante impide que el cojín se corra al transferir o al sentarse.
- **No apile nada encima ni debajo:** otra almohada o una toalla doblada anulan la inmersión.
- Manténgalo lejos del fuego, de fuentes de calor y del sol directo: degradan la espuma.
- No lo doble ni lo comprima para guardarlo o transportarlo.
- **Uso individual.** Por higiene, el cojín y su funda son de un solo usuario.

7 LIMPIEZA


La funda: retírela y lávela por separado; no la planche.
Conviene tener una funda de repuesto.

El bloque de espuma: límpielo con paño humedecido y jabón suave y séquelo a la sombra. No lo sumerja, no lo meta en la lavadora y no use solventes.


8 CUÁNDO CAMBIAR EL COJÍN

- La prueba de la mano da fondo.
- La espuma no recupera su forma o queda una huella permanente.
- El pozo pélvico o los bordes perdieron su contorno.
- La funda perdió su base antideslizante o ya no cierra.

9 MAPA DE PRESIONES

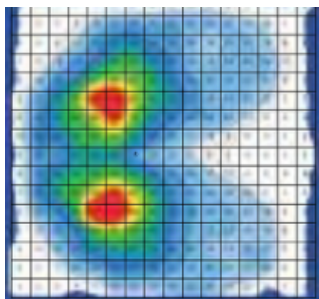

Antes · asiento convencional

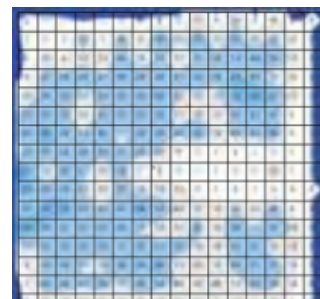

Después · con el cojín

Mapa del fabricante sobre un paciente de referencia de 175 cm y 100 kg. Sin cojín aparecen dos focos rojos bajo los isquiones, en el extremo alto de la escala (≈ 140); con el Confort Care toda la superficie queda en la banda baja (≈ 28). El resultado varía según el peso, la postura y la colocación.

ESPECIFICACIONES Y GARANTÍA

Datos técnicos y respaldo del producto

10 ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material del bloque	Espuma de poliuretano (PU) Bestabsorb™
Geometría	Base contorneada pélvica, con pozo isquiático, bordes de fémur y trocánter, canal posterior y perforaciones de ventilación
Inmersión isquiática	2 a 3 cm
Medidas	42 × 42 × 8 cm (GHC-SEAT-004) · 46 × 42 × 8 cm (GHC-SEAT-004L)
Peso máximo del usuario	100 kg
Funda	Malla transpirable con tela de enfriamiento en la cara superior —el fabricante declara hasta 2 °C menos de temperatura de contacto— y base antideslizante
Ensayo de la espuma	SGS · RoHS: sin metales pesados ni ftalatos regulados
Garantía	1 año por defectos de fabricación

11 GARANTÍA

Grand Healthcare Colombia S.A.S. responde por este producto durante **un (1) año** contado desde la entrega al consumidor, reparando o cambiando cualquier pieza que presente fallas en condiciones normales de uso o defectos de fabricación. Este término no sustituye ni limita la garantía legal prevista en la **Ley 1480 de 2011**. No cubre daños por uso distinto al descrito en este manual, incumplimiento de las pautas de limpieza, exposición al sol o al calor, ni cortes o perforaciones por objetos cortopunzantes. Conserve la factura.

12 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

IMPORTA Y COMERCIALIZA

Grand Healthcare Colombia S.A.S.

NIT 901.044.954-9 · Calle 75 # 23-09, Bogotá D.C.

REGISTRO SANITARIO INVIMA

2017DM-0016822 · Marca Grand Healthcare

Dispositivo no invasivo, Clase I · vigente hasta el 13 de septiembre de 2027

FABRICANTE

Well Lands Enterprise Co., Ltd.

Espuma de poliuretano ensayada por SGS bajo RoHS: sin metales pesados ni ftalatos regulados

REFERENCIA Y LOTE

GHC-SEAT-004 · GHC-SEAT-004L

Referencia y lote impresos en la etiqueta del producto

REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS — TECNOVIGILANCIA

Repórtelo a info@grandhealthcare.com.co o al **311 885 8888**. Grand Healthcare Colombia lo notificará al programa nacional de tecnovigilancia del INVIMA conforme a la Resolución 4816 de 2008.

FUNDAS DE REEMPLAZO Y SOPORTE

PBX (601) 285 1383 · WhatsApp 311 885 8888 · www.grandhealthcare.co — la atención de garantía y el suministro de repuestos no dependen del punto donde haya comprado el producto.