

COLCHONETA DE GEL MULTIUSO


Referencia GHC-MATT-002 · para la cuna o para la zona pélvica en la cama

IMPORTANTE: lea este manual antes de usar la colchoneta. Para el **sueño de un bebé menor de 12 meses** úsela solo en el entorno asistencial y con vigilancia del personal: en casa, el bebé debe dormir sobre un colchón firme y plano, sin nada encima. Retírela siempre para una reanimación.

1 QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONA

Es un paño de **gel polimérico de grado médico** dividido en pequeñas celdas cuadradas, sobre una base de **espuma viscoelástica**. Cada celda se deforma bajo el peso del cuerpo y reparte la carga hacia las vecinas, de modo que la presión no se concentra en un solo punto. El gel además disipa el calor y ayuda a mantener fresca la piel.

Mide **90 × 57 cm y 2 cm de espesor**, el tamaño de una cuna, y sus 90 cm coinciden con el ancho de una cama sencilla u hospitalaria. Por eso tiene **dos usos**: sobre el colchón de la cuna, o atravesada en la cama bajo la pelvis de un adulto, donde se forman la mayoría de las úlceras por presión. Se entrega con **sábana y cubierta impermeable ajustable con elástico**, hechas a su medida.

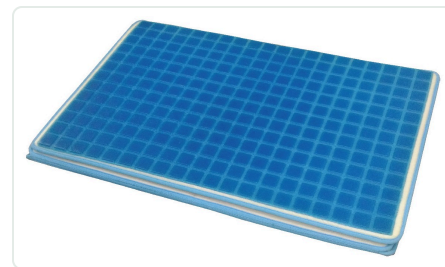

Paño de gel de 90 × 57 × 2 cm

2 PARA QUIÉN ESTÁ INDICADA

- **En la cuna:** pacientes pediátricos en cuna hospitalaria, servocuna o unidad neonatal o pediátrica, vigilados por el personal.
- **En la cuna en casa:** solo niños mayores de 12 meses con movilidad reducida, por indicación del profesional de salud.
- **Bajo la pelvis en la cama:** adultos con riesgo bajo de úlcera por presión, para proteger el sacro y las caderas y refrescar la zona.
- ✗ Sueño de un bebé menor de 12 meses en casa o sin vigilancia.
- ✗ Riesgo alto o muy alto, o una úlcera ya formada: se necesita una superficie de aire alternante.
- ✗ Sobre un colchón hundido, en el piso o sin colchón debajo.

Sueño seguro del bebé. La recomendación internacional vigente para el sueño de los menores de 12 meses es un colchón **firme y plano, sin ninguna superficie blanda encima**. Por eso, en bebés menores de 12 meses esta colchoneta se usa **solo en el entorno asistencial** —cuna hospitalaria, servocuna, unidad de recién nacidos o pediátrica— con el paciente posicionado y vigilado por el personal a cargo. **No la use para el sueño de un bebé en casa.**


Referencia: American Academy of Pediatrics, Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment, Pediatrics 150(1), 2022.

COLOCACIÓN

En la cuna o en la cama, paso a paso

3 EN LA CUNA


- 1 **Revise el colchón de la cuna.** debe estar firme, plano y sin deformaciones. La colchoneta lo acompaña; no corrige un colchón hundido.
- 2 **Ponga la cubierta impermeable.** ajústela con su elástico alrededor de la colchoneta, sin arrugas.
- 3 **Colóquela centrada.** con el gel hacia arriba, sin bordes levantados ni espacios contra las paredes de la cuna.
- 4 **Tienda la sábana.** bien estirada: una sábana arrugada crea puntos de presión y fricción sobre la piel.
- 5 **Vigile y revise la piel.** mantenga los cambios de posición definidos y revise nuca, omóplatos, sacro y talones.

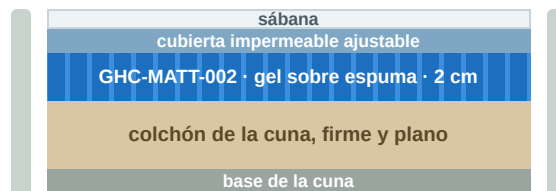

Corte de la cuna: la colchoneta va sobre el colchón, dentro de su cubierta y bajo la sábana, sin espacios contra las paredes de la cuna.

4 EN LA CAMA, BAJO LA PELVIS

- 1 **Ponga la cubierta impermeable.** ajustada con su elástico.
- 2 **Atraviésela en la cama.** con el lado de 90 cm a lo ancho de la cama, a la altura de la pelvis: debe ir desde la cintura hasta la mitad de los muslos.
- 3 **Tienda la sábana encima.** lisa, sin pliegues ni empapadores doblados debajo de la persona.
- 4 **Acueste a la persona y verifique.** que el sacro y las caderas queden sobre el gel, no sobre el borde.
- 5 **Vuelva a centrarla.** después de cada cambio de posición o si la persona se desliza hacia los pies.

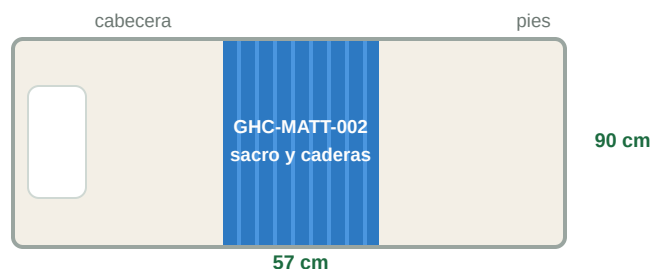

Vista superior: el paño va atravesado bajo la pelvis.

De lado: cuando la persona está de lado, el apoyo pasa a la cadera. Revise que la cadera quede sobre el gel y no sobre el borde de la colchoneta.

CUIDADO Y VIDA ÚTIL

Cambios de posición, limpieza y cuándo cambiarla

Esta colchoneta no reemplaza los cambios de posición. Reparte la carga, pero el tejido sigue comprimido mientras la persona permanece en la misma postura. Cambie la posición con la frecuencia que indique el equipo de salud y revise la piel a diario: si un enrojecimiento no desaparece 30 minutos después de retirar la presión, consulte al profesional tratante.

5 ADVERTENCIAS

- **Retírela para una reanimación:** las compresiones del pecho exigen una superficie rígida.
- **Lejos de objetos cortopunzantes:** agujas, tijeras o uñas largas pueden cortar la película del gel.
- No deje espacios entre la colchoneta y las paredes de la cuna, ni bordes levantados.
- No la use sobre fuentes de calor ni la esponga al sol directo.
- **Entre pacientes:** límpiela y cambie la sábana y la cubierta antes de usarla con otra persona.

6 LIMPIEZA

La sábana y la cubierta: retírelas y lávelas por separado siguiendo su etiqueta; la cubierta impermeable también se limpia con paño húmedo y jabón neutro. No use cloro, no las planche ni las seque con calor alto.

El gel y la espuma: paño humedecido en agua y jabón neutro, retiro del jabón con un paño limpio y secado al aire sobre una superficie plana.

No use yodo, solventes, abrasivos ni esponjas metálicas. No la sumerja ni la lave en lavadora.

7 CUÁNDO CAMBIARLA

- La película del gel tiene cortes o el gel se sale: retírela de inmediato.
- La espuma quedó marcada o hundida de forma permanente.
- La cubierta perdió su elástico o su impermeabilidad.
- Aparecen enrojecimientos que no se van, o cambió el riesgo del paciente.

Almacenamiento: extendida y plana, en un lugar seco, protegida del polvo y del sol, sin peso encima.

ESPECIFICACIONES Y GARANTÍA

Datos técnicos y respaldo del producto

8 ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	GHC-MATT-002 · fábrica GEL-BED-9057
Dimensiones	90 cm (largo) × 57 cm (ancho) × 2 cm
Formato	Paño único, sin pliegues
Capa superior	Gel polimérico de grado médico en cuadrícula de celdas
Capa base	Espuma viscoelástica
Incluye	Sábana y cubierta impermeable ajustable con elástico
Usos	Sobre el colchón de la cuna, o atravesada bajo la pelvis en la cama
Materiales	Informes de ensayo SGS, REACH y RoHS, según el fabricante
Garantía	1 año por defectos de fabricación

9 GARANTÍA

Grand Healthcare Colombia S.A.S. responde por este producto durante **un (1) año** contado desde la entrega al consumidor, reparando o cambiando cualquier pieza que presente fallas en condiciones normales de uso o defectos de fabricación. Este término no sustituye ni limita la garantía legal prevista en la **Ley 1480 de 2011**. No cubre daños por uso distinto al descrito en este manual, incumplimiento de las pautas de limpieza, exposición al sol o al calor, ni cortes o perforaciones por objetos cortopunzantes, ni el desgaste natural del gel, la espuma, la sábana y la cubierta. Conserve la factura.

10 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

IMPORTA Y COMERCIALIZA

Grand Healthcare Colombia S.A.S.
NIT 901.044.954-9 · Calle 75 # 23-09, Bogotá D.C.

REGISTRO SANITARIO INVIMA

2024DM-0029886 · Resolución 2024055892 del 4 de diciembre de 2024
Dispositivo no invasivo, Clase I · vigente hasta diciembre de 2034

FABRICANTE

Changzhou Well Lands Technology Co., Ltd. — China
Informes de ensayo de materiales SGS, REACH y RoHS, según el fabricante

REFERENCIA Y LOTE

GHC-MATT-002 · referencia de fábrica GEL-BED-9057
Referencia y lote impresos en la etiqueta del producto

REPORTE DE EVENTOS ADVERSOS — TECNOVIGILANCIA

Repórtelo a info@grandhealthcare.com.co o al **311 885 8888**. Grand Healthcare Colombia lo notificará al programa nacional de tecnovigilancia del INVIMA conforme a la Resolución 4816 de 2008.

CUBIERTAS DE REEMPLAZO Y SOPORTE

PBX: (601) 285 1383 · WhatsApp 311 885 8888 · www.grandhealthcare.co