

Grand Healthcare

Sistema Aries Effect 5000



SUPERFICIES ESPECIALES PARA MANEJO DE PRESIÓN



**Colchoneta de aire
con compresor
movimiento alternante
y control de humedad**



Las úlceras por presión se pueden prevenir

Estamos logrando un impacto real en la vida de los pacientes y profesionales médicos además de mejorar la salud en general..

La ciencia y la innovación son nuestros pilares, pero solo importan si podemos usar lo que sabemos para mejorar la vida de las personas.



Entendemos que el cuidado de la piel para la prevención de heridas es complejo y es necesario que las superficies de descanso se adapten para controlar los niveles de sudoración de los pacientes.

Por eso proponemos esta superficie con micro perforaciones láser en el área del torso que proporcionan una baja pérdida de aire, logrando que sea más fácil mantener el equilibrio de humedad del cuerpo, previniendo la aparición de hongos y bacterias que estimulan la presencia de heridas que comprometen la salud de los pacientes con problemas de movilidad.



 **Grand
Healthcare**

Grand Healthcare

Sistema Aries 5000



Sistema

Aries 5000



Nuevo Diseño

– Control de humedad –

Comodo

Facil Manejo

Seguro

Conveniente



Superficie especial para la prevención de escaras o úlceras por presión

El Sistema Aries 5000 esta diseñado para la prevención, tratamiento, cuidado inmediato de pacientes con alto riesgo de padecer úlceras de presión dispersando la presión lejos de las protuberancias óseas a través de presiones alternas, utilizando una colchoneta de 17 celdas inflables para máximo confort.

En cada ciclo el compresor alterna el inflado de las celdas pares e impares para repartir la presión del cuerpo, evitando así la aparición de escaras.

La colchoneta inflable se coloca encima de nuestro colchón habitual para ser usado por el paciente obteniendo así máximo confort.

El compresor es compacto, silencioso, de bajo consumo eléctrico y de funcionamiento sencillo permite ser regulado según el peso del paciente por medio de una rueda manual que regula la presión de aire. Soporta hasta 140kg de peso.

Este nuevo diseño de 17 celdas tubulares es mucho mas eficiente terapéuticamente que su predecesor de 130 celdas, ya que incorpora terapia de baja perdida de aire para evitar que el paciente transpire.

Sus celdas son de 12 cm de altura en lugar de 6cm para una mejor y más eficiente distribución de presión, debido a la composición del material de fabricación (Nylon/PVC) su vida útil es mas duradera.

Estas celdas pueden ser reemplazadas prolongando la vida útil de la unidad

A pacientes con escaras o con riesgo de padecerlas se les recomienda usar el Sistema Aries 5000 para prevenir y tratar las escaras.

Garantía
1
Año



SISTEMA ARIES 5000



Paciente: 175cm/100kg/Hombre

Colchón Normal

MAPA DE PRESIONES



Sistema Aries

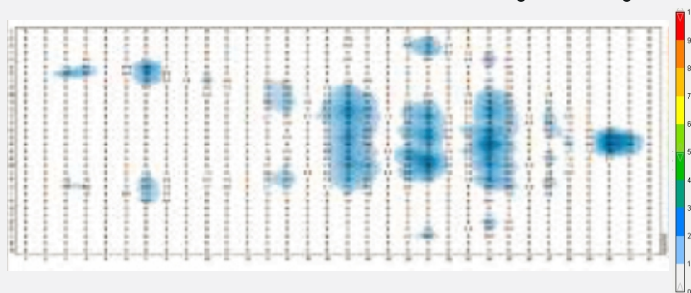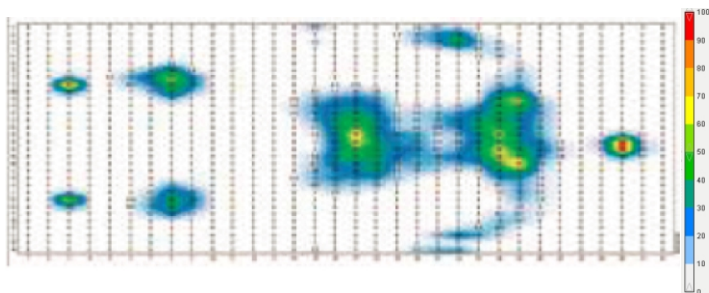

Descripción del Sistema

		Aries V PLUS
COM PRE SOR	Dimensiones	27 x 11 x 9.5 cm
	Peso	1.2 kg
	Salida de Aire	5 liter/min.
	Material de la Caja	ABS
	Rango de Presión	40~100 mmHg
	Siclos de Tiempo	10~12 min.
Fuente de Energía		AC 230V/50Hz ; 120V/60Hz /50Hz ; 120V/60Hz

		EFFECT 5000
COL CHON ETA	Dimensiones Inflado	190 x 88 x 11 cm
	Alternancia	A/B Alternating
	Estructura	17 x 4.3" Cells
	Material Cubierta	Nylon/PU con botón
	Material Celdas	Nylon/PVC
	Material Base	Nylon/PVC
	Solapas en los Extremos	YES
	Baja Perdida de Aire	Option
Máxima Capacidad de Peso	140 kg	
Norma de Retardante de Fuego	CA 117	

Funciones y características



Perilla de ajuste de presión



Conector rápido con tapa



Cubierta superior a prueba de agua permeable al vapor, brinda una superficie de baja fricción con la piel



Celda de aire intercambiable puede limpiarse y ser reemplazada



Baja pérdida de aire ayuda a mantener la piel seca





Grand Healthcare
Fabricante de Equipos Médicos

**Exclusivo Diseño
Ahora Incluye
Novedoso y Practico
Conector Rápido
con Tapa**



Sistema Aries Effect 5000





Este exclusivo conector tiene como objetivo facilitar la conexión de las mangueras que se conectan de la colchoneta al compresor de una mano rápida y efectiva.

Incluido en la colchoneta de burbujas Aries 2500 y la colchoneta de celdas tubulares Aries 5000. Grand Healthcare ofrece este práctico y cómodo conector que nos permite en caso de corte de energía mantener la presión interna del colchón, colocándole la tapa del conector para evitar fuga del aire que mantiene el colchón inflado.

Otro de los aspectos convenientes de este conector es que nos permite transportar al paciente en su cama sin que el colchón se desinfle.

Además evita que las mangueras se desprendan del compresor como en el caso de los modelos corrientes de colchones.

Otros equipos en el mercado no cuentan con este imprescindible artículo que evita frustraciones al momento de realizar las conexiones de las mangueras.



Seguro

Comodo

Pensados para su Bienestar

Facil Manejo

Eficaz



ISO 13485:2003

